

Adox

Oral Care シリーズ

mouth+aid



Medical Care Labo



口腔内 の健康

Adox 抗菌マウスピース mouth+aid

寝ているときの口腔内ケアに

Adox. mouth+aidには抗菌効果のある素材がつかわれています。この素材は弊社が特許取得しているもので抗菌効果は持続します。

マウスピースの効果

睡眠時装着するだけで下記の結果が証明されました。

- 1 口腔内の歯周病菌だけを死滅**
神奈川歯科大学の論文の発表によると寝ているときに装着するだけで、口腔内の歯周病菌の増殖を抑制し、口腔内を健康な状態に保ちます。その結果、認知症の予防効果がある事になります。
- 2 口臭予防効果の解明**
口臭の原因となるメチルカプタンを減少させることが証明されました。自分の口臭が気になる方におすすめです。
- 3 マウスピースに抗菌効果**
このマウスピースには抗菌成分が添加されているので、抗菌効果が持続します。

開発・原料 : 株式会社アドックス

製造・販売元 : 株式会社メディカルケアラボ (MCL)

URL : adox.pro/pd

(本社) 〒460-0003 名古屋市中区錦 2-19-1
名古屋鴻池ビル 1104

(研究所) 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通 1-23-2
キングハイツ瑞穂 2F

TEL (052) 841-3677 FAX (052) 841-9889



Adox

Oral Care シリーズ


mouth+aid

MouthPiece

寝ているときの口腔内ケアに...

Adox.mouth+aidには抗菌効果のある素材がつかわれています。
この素材は弊社が特許取得しているもので抗菌効果は持続します。

自分の歯型に合わせて簡単に成形出来ます!!

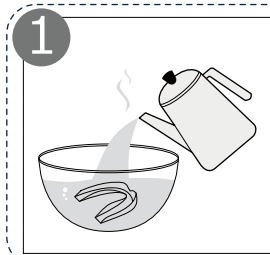


1
マウスピースを約75℃のお湯に約30秒入れます。やけどしないように箸などで取り出します。



2
鏡の前でマウスピースのくぼみが上の歯の中心になる位置でしっかりかかと噛んでください。

※やけどに注意!!

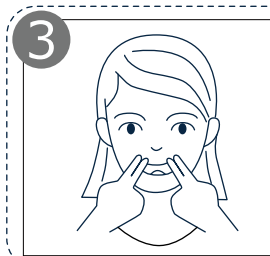

3
上の歯の外側に指を当て歯と歯茎にフィットするように押し当ててください。



4
マウスピースを口から外して水で冷やして完成になります。

- 商品名 : Adox mouth+aid ■材質 : 本体EVA樹脂、ケース : PP樹脂
- 製品サイズ 幅5.3cm×長さ6.3cm×高さ1.7cm
- 内容品 : マウスピース×1、日本語説明書、専用ケース
- ※仕様・製品デザイン等は予告なく変更する場合があります。

◆保管時の注意

- 使用後は、AdoxPG2500抗菌洗浄剤又は、入れ歯洗浄剤などで洗い、よく乾かしてからケースに保管してください。
- 極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管して下さい。

〈用途〉

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。

メーカー希望小売価格 【税込】 19,800円

◆使用前にお読みください

〈使用上の注意〉

マウスピースが上の歯に重なり、口の周りがふくらみますので口内に違和感が生じます。日中の無理のない数時間から始め、違和感がなくなるまで慣らした後、睡眠中のご使用を始めてください。

〈下記の方はご使用しないでください〉

- 鼻に疾患があり呼吸が困難な方。
- 歯の治療中、または口腔内に異常のある方。
- 入れ歯の多い方
- 本体を使用して、顎関節に痛みを生じた場合はご使用をお止めください。
- お子様にご使用の場合は、歯科医の先生等専門医にご相談の上ご使用ください。

【開発・原料】株式会社アドックス
【製造・販売元】株式会社メディカルケアラボ
(本社) 〒460-0003 名古屋市中区錦2-19-1
名古屋鴻池ビル1104
(研究所) 〒467-0806 名古屋市瑞穂区
瑞穂通1-23-2 キングハイツ瑞穂2F
TEL (052) 841-3677 FAX (052) 841-9889
ホームページ <http://mcl.co.jp>

総販売店【特約店・取扱い店】